



LIFTKAR PT Adapt 130 / 160. Gemeinsam geht es leichter.

Elektrischer Treppensteiger zum Anbauen an Ihren Rollstuhl. In wechselweiser Kombination mit der elektrischen Schiebe- und Bremshilfe **Heymer Push** von Rehatechnik Heymer die ideale Lösung zur Bewältigung von Steigungen und Treppen.



VORTEILE

Lebensqualität ist, wenn man auch im Rollstuhl Treppen sicher bewältigt. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dem bietet der LIFTKAR PT Adapt auch in nicht-barrierefreien Gebäuden ein Plus an Mobilität. Sei es im Urlaub oder beim Besuch bei Freunden. Und keine Sorge: Der elektrische Treppensteiger bewegt sich sanft und ohne Spuren und Kratzer auf Treppen zu hinterlassen.

Um den LIFTKAR PT Adapt mit einem bereits vorhandenen Rollstuhl nutzen zu können, wird der notwendige Adapter angepasst. Das ist übrigens bei den meisten Rollstuhltypen ohne großen Aufwand möglich.

Ein leistungsfähiger Schnellwechselakku, sowie das als Zubehör erhältliche KFZ-Ladegerät sorgen dafür, dass der LIFTKAR PT Adapt jederzeit einsatzbereit ist.

Erhältlich in Ausführungen für bis zu 130 kg bzw. bis zu 160 kg.

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	130 kg / 160 kg
Gesamtgewicht	24,7 kg
Gesamthöhe	1130 mm
Gesamtbreite	482 mm (ohne Rollstuhl)
Maximale Stufenhöhe	220 mm
Reichweite pro Akkuladung	Richtwert: 300 - 500 Stufen, abhängig vom Personengewicht und ob hinauf- oder hinuntergefahren wird. Bei häufigem Einsatz ist ein Zweitakku zu empfehlen. KFZ-Ladegerät als Zubehör verfügbar.
HMV	18.65.01.1030

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Österreich

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Deutschland

Tel. +49 8033 / 308 96-0
Fax +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com


www.liftkardirect.co.uk

SANO makes life easier.



Heymer Push. Gemeinsam geht es leichter.

Elektrische Schiebe- und Bremshilfe. In wechselweiser Kombination mit dem elektrischen Treppensteiger **LIFTKAR PT Adapt** von SANO die ideale Lösung zur Bewältigung von Steigungen und Treppen.

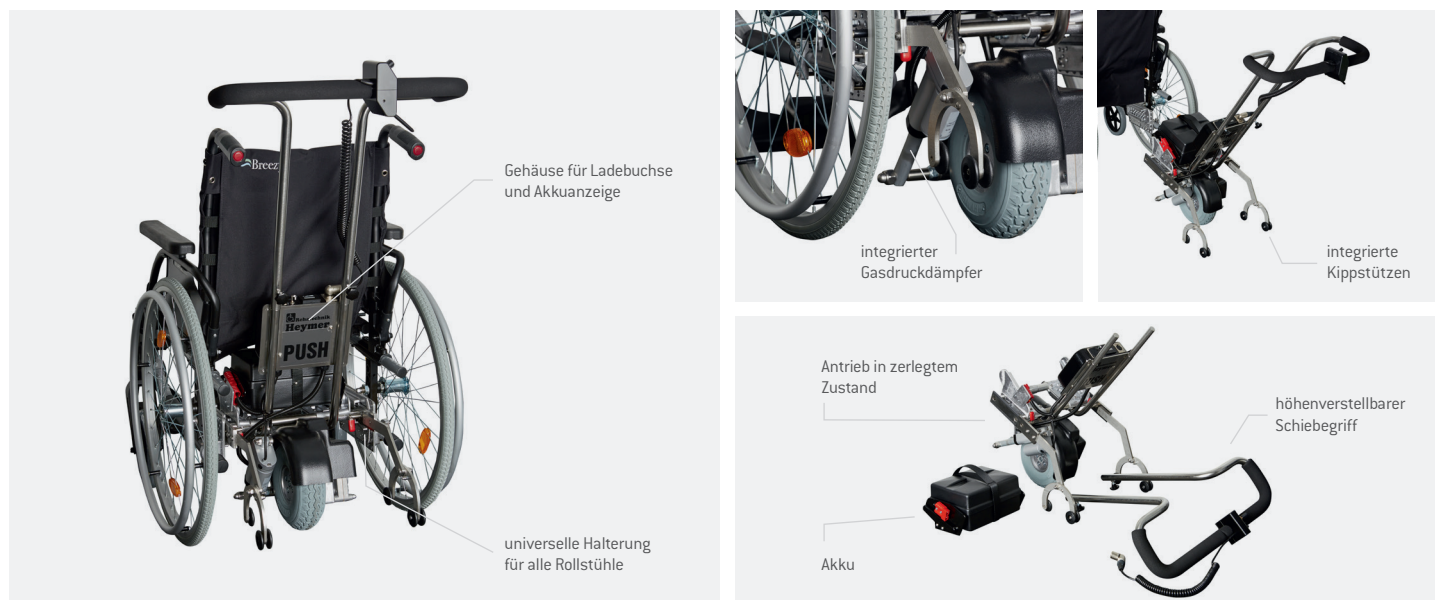

VORTEILE

Der Heymer Push ist eine elektrische Schiebe- und Bremshilfe, die an nahezu alle Faltrollstühle angebaut werden kann. Mit dem Heymer Push wird das Schieben des Rollstuhls zur reinen Freude, da der Antrieb des Heymer Push immer den notwendigen Bodenandruck liefert, um den Rollstuhl sicher durch hügeliges Gelände zu fahren. Längere Ausflüge in die Natur oder Stadt werden wieder möglich.

Durch den integrierten Gasdruckdämpfer wird die Kraftübertragung zum Boden optimiert und Insassen werden vor Erschütterungen durch Bodenunebenheiten geschützt.

Es gibt eine universelle Halterung für alle Rollstühle. Diese ist ideal für den Wiedereinsatz oder für den Anbau an andere Rollstühle. Der Heymer Push mit integrierten Kippstützen wird einfach (manuell oder elektrisch) von hinten an den Rollstuhl gefahren und durch zwei Bolzen gesichert.

In dem Gehäuse befinden sich gut erreichbar die Ladebuchse für den Akku, die Betriebsanzeige und die Akkuanzeige. Das Bedienteil ist komfortabel an den höhenverstellbaren Schiebegriffen angebracht.

Zum Verladen des Heymer Push ins Auto können Akku und Schiebegriffe einfach entfernt werden. Der Antrieb lässt sich somit leicht im Kofferraum verstauen.

Mit dem von SANO angebotenen Kombiadapter ohne großen Aufwand mit dem Treppensteigergerät LIFTKAR PT Adapt nutzbar.

TECHNISCHE DATEN

Vorwärtsgeschwindigkeit *	bis 5,8 km/h
Rückwärtsgeschwindigkeit *	bis 3,5 km/h
max. Reichweite in der Ebene *	15 km
max. befahrbare Steigung / Neigung *	15 %
Gesamtgewicht mit / ohne Akku	21 kg / 12,5 kg
Sitzbreite des Rollstuhls	40 - 48 cm
Sitzhöhe des Rollstuhls	ab 27 cm mit separatem Akkupack
zulässige Belastung	150 kg (Person mit Rollstuhl und Antrieb)
max. Hindernishöhe	5 cm
L / B / H Grundgerät gesamt	30 cm / 30 cm / 40 cm
Motor	24 V DC / 150 W
Getriebe	selbsthemmendes Schneckenradgetriebe
Akkueinheit mit Tragegriff	2 x 12 V / 12 Ah
Ladegerät	24 V / 5 A
HMV	18.99.04.1011

* unter Testbedingungen