




Rehatechnik
HEYMER

BARRIEREFREIES BAUEN

Heymer **Sit&Swing**

SCHWENKBARER SITZLIFTER
FÜR DIE BADEWANNE

Wir helfen bei
der Antrags-
stellung!

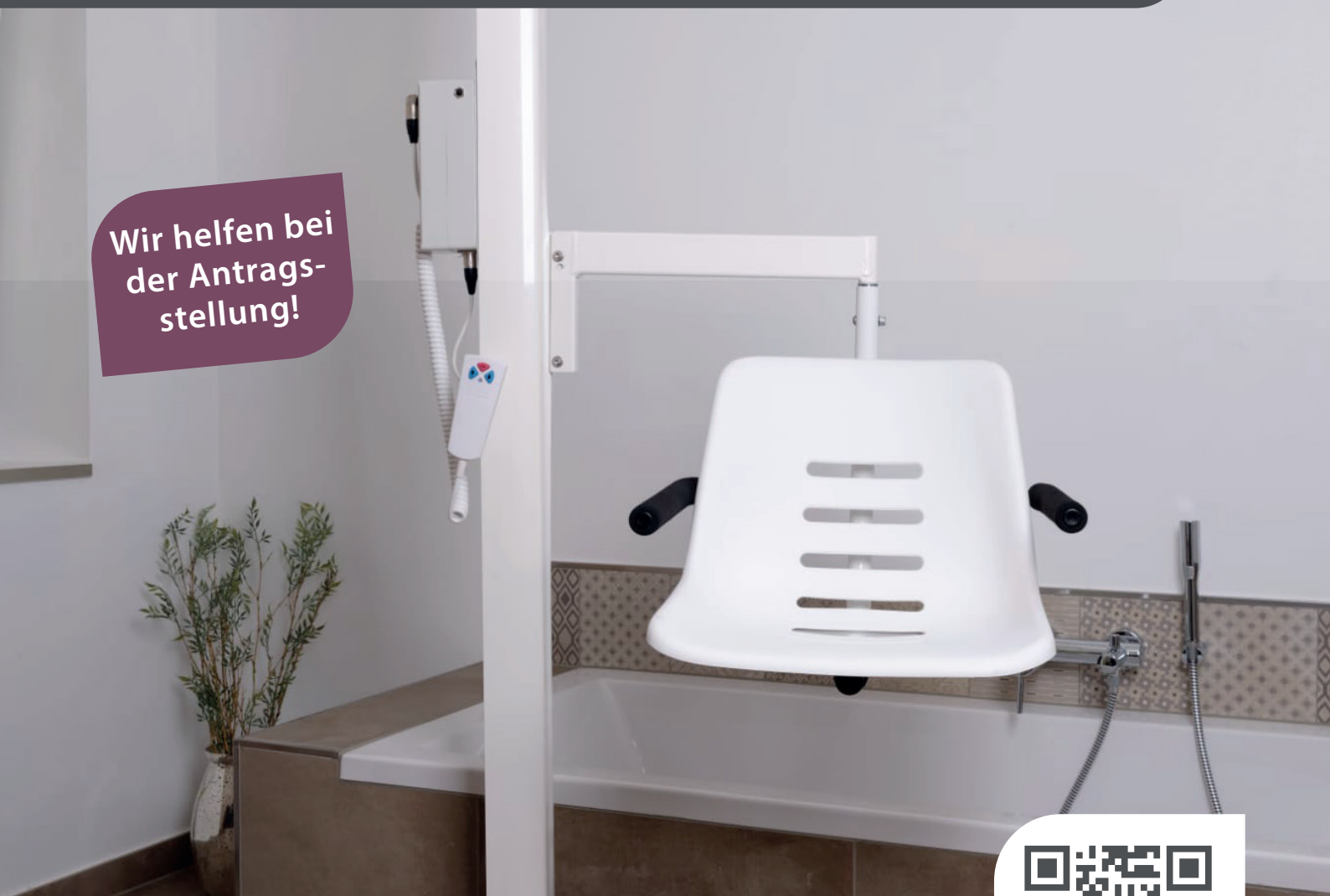

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer **Sit&Swing**

SCHWENKBARER SITZLIFTER FÜR DIE BADEWANNE

Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen – mit dem revolutionären Sitzlifter Heymer **Sit&Swing**!

Dieses außergewöhnliche Gerät ermöglicht ein müheloses und schmerzfreies Ein- und Aussteigen in die Badewanne, ganz ohne aufwendige Umbauten.

Mit dem Heymer **Sit&Swing** können Sie Ihr entspannendes Bad wieder genießen, ohne sich Gedanken über unangenehme Körperpositionen oder mögliche Verletzungen machen zu müssen. Der Sitzlifter ist einfach zu bedienen und lässt sich

sicher an nahezu jeder Badewanne befestigen – ganz ohne komplizierte Installationen oder hohe Kosten. Zur Befestigung wird der **Sit&Swing** sicher zwischen Boden und Decke verspannt und montiert.

Der Heymer **Sit&Swing** ist die ideale Lösung für Menschen jeden Alters und jeder körperlichen Verfassung, die Wert auf Komfort, Unabhängigkeit und Sicherheit im Badezimmer legen.

Gönnen Sie sich den Luxus des schmerzfreien Ein- und Aussteigens mit dem Heymer **Sit&Swing** – für mehr Wohlbefinden und Freiheit in Ihrem persönlichen Badezimmer!



Komfortabler Einstieg durch Schwenkbarem Arm und verstellbaren Sitzlift.



Höchste Position, um auch hohe Badewannen zu überwinden.



Position bis auf den Grund der Wanne, um ein erholsames Bad nehmen zu können.

Technische Daten:

Motor	24 V DC
Wartungsfreier Akku	2 x 12 V/0,5 A mit Texasstecker
Tragfähigkeit	bis 130 kg
Raumhöhe	bis 2,50 m als Standard



MONTAGEHINWEIS

Der Heymer **Sit&Swing** kann nur unter folgenden baulichen Voraussetzungen zum Einsatz kommen: Fußboden und Decke aus Beton für ausreichend Klemmkraft. Im Fußboden darf keine Fußbodenheizung verbaut sein.



Unterste Position, damit man sich nach einem Sturz wieder selbst aufrichten kann.

Gerne kommen wir auch persönlich bei Ihnen vorbei.



Im Lieferumfang ist eine PE-Platte enthalten, welche kleinste Unebenheiten ausgleicht.

Technische Daten:

Hubhöhe	ca. 75 cm
Länge Ausleger	ca. 50 cm
Sitzbreite	ca. 50 cm

CE
Technische
Änderungen
vorbehalten

Heymer
Made in
Germany

02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de





BARRIEREFREIES BAUEN



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik
HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0
Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de
www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

