


Heymer **HHB 2025**

HEBEBÜHNE FÜR FALTROLLSTÜHLE

Für Innen
und Außen

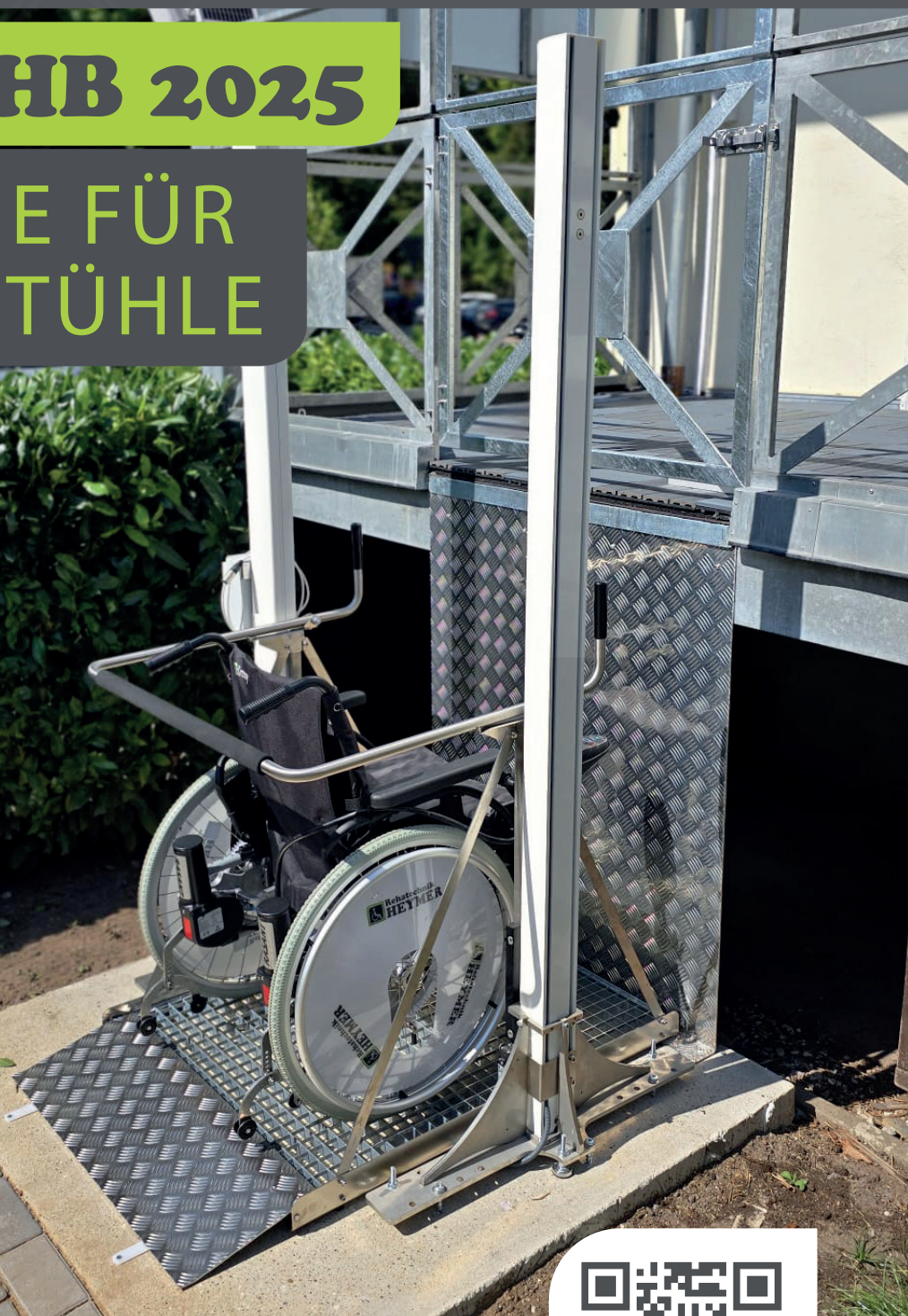

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer **HHB 2025**


HEBEBÜHNE FÜR FALTROLLSTÜHLE

Extrem flache
Auffahrrampe.

Die Heymer **HHB 2025** ist konzipiert, um Rollstuhlfahrern bei der Überwindung von Höhenunterschieden bis 125 cm zu helfen. Die Gesamtbelastung beträgt max. 180 kg.

Die Heymer **HHB 2025** ist in 3 Teile zerlegbar und somit innerhalb des Hauses oder an schwer zugänglichen Standorten einbaubar. Der Untergrund muss aus einem waagerechten und tragfähigen Fundament bestehen, damit die Hubsäulen befestigt werden können.

Die Plattform der Hebebühne gibt es in 2 Größen: 800 x 1000 mm und 900 x 1200mm (Breite x Länge). Die Plattform wird zwischen den Hubsäulen installiert.

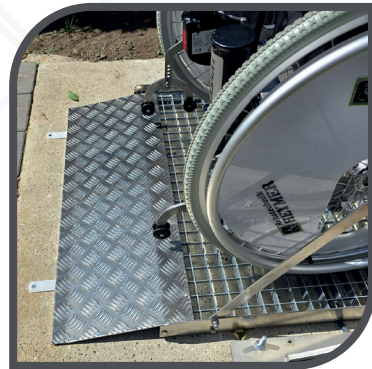

Die Auffahrrampe klappt beim Anheben ab und verhindert damit ein Zurückrollen des Rollstuhls von der Plattform. Sie ist extrem flach mit einer Höhe von nur 3 cm.



Als zusätzliche Sicherung ist ein abschwenkbarer Sicherheitsbügel angebracht.

Das Fundament – die Basis für Ihre Hebebühne **HHB 2025**

Für die Installation und den sicheren Betrieb der Hebebühne **HHB 2025** ist ein stabiles Fundament dringend erforderlich.

Sie haben drei flexible Möglichkeiten, wie es umgesetzt werden kann:

- Komplett durch uns**
Wir übernehmen die komplette Fundamenterstellung – schnell, zuverlässig und ohne zusätzlichen Aufwand für Sie.
- Teilweise durch uns**
Wir erledigen einen Teil der Arbeiten, den Rest übernehmen Sie oder ein Fachbetrieb Ihrer Wahl.
- Komplett durch Sie**
Sie organisieren und erstellen das Fundament nach unseren Vorgaben selbst.



Hinweis zum Betrieb:
Für den Betrieb der Hebebühne **HHB 2025** ist ein Stromanschluss erforderlich. Auf Wunsch kann das System auch mit Akkubetrieb ausgestattet werden.

Technische Daten:

Antrieb	Permanentmotoren 24 V/54 W
Aufwärtsgeschw.	1,8 cm/sec
Max. Hubhöhe	1250 mm
Plattformbreite	800 x 1000 mm
Plattformbreite	900 x 1200 mm

Vorteile

- 1. Barrierefreiheit**
Ermöglicht eigenständigen Zugang zu Gebäuden oder auch bei Höhenunterschieden (z. B. Treppen oder Stufen mit Podest).
- 2. Selbstständigkeit & Unabhängigkeit**
Menschen im Rollstuhl können selbst ohne Hilfe verschiedene Ebenen erreichen (z. B. Hauseingang, Terrasse, Garage). Steigert das Selbstwertgefühl und reduziert die Abhängigkeit von anderen.
- 3. Entlastung für Angehörige & Pflegekräfte**
Körperliche Belastung entfällt, weil kein Heben oder Schieben über Treppen und Rampen notwendig ist.
- 4. Alternative zu kostenintensiven Umbauten**
Günstiger und schneller installiert als etwa ein Aufzug oder ein kompletter Umbau mit Rampen. Besonders bei begrenztem Platzangebot sinnvoll.



Plattform
800 x 1.000 mm
900 x 1.200 mm

Gerne kommen wir auch persönlich bei Ihnen vorbei.



02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de



Technische Daten:

Auffahrhöhe	3 cm
Max. Belastung*	180 kg
Stromanschluß	220 V
Akku	2 x 12 V, 7,2 Ah
Ladegerät	24 V/2,8 A

* Patient + Rollstuhl



Technische Änderungen vorbehalten



Heymer
Made in Germany

www.rehatechnik-heymer.de



BARRIEREFREIES BAUEN



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de

Ihr Sanitätsfachhandel

