



Rehatechnik **HEYMER**

BARRIEREFREIES BAUEN

Heymer **StepUp**

STUFENLIFTER

Gefahrlos über die
Treppenstufen
ins Haus gelangen.



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer **StepUp**

STUFENLIFTER

Der Stufenlifter **StepUp** ist ein neues Produkt, damit eingeschränkte Personen mit ihrem Rollator oder Rollstuhl sicher, gefahrlos und angstfrei über die Treppenstufen ins Haus gelangen. Der Stufenlifter **StepUp** ermöglicht den Verbleib in der häuslichen Umgebung, weil die Stufen vor der Haustür kein Problem mehr darstellen.

Das Fundament – die Basis für Ihren Stufenlifter **StepUp**

Für die Installation und den sicheren Betrieb des Stufenlifters **StepUp** ist ein stabiles Fundament erforderlich.

Sie haben drei flexible Möglichkeiten, wie es umgesetzt werden kann:

- **Komplett durch uns**
Wir übernehmen die komplette Fundament-erstellung – schnell, zuverlässig und ohne zusätzlichen Aufwand für Sie.
- **Teilweise durch uns**
Wir erledigen einen Teil der Arbeiten, den Rest übernehmen Sie oder ein Fachbetrieb Ihrer Wahl.
- **Komplett durch Sie**
Sie organisieren und erstellen das Fundament nach unseren Vorgaben selbst.



Der Stufenlifter **StepUp** ist für Personen geeignet, die:

- auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind
- große Mühen beim Überwinden von Treppenstufen haben
- Angst haben, dass sie auf der Treppe fallen könnten
- keine Stufen mehr vor oder im Haus steigen können

Der Stufenlifter **StepUp** wird selbst oder von einer Begleitperson bedient. In der Ruhestellung des Stufenlifters kann die Treppe weiterhin durch Hausbewohner genutzt werden.

Hinweis zum Betrieb:

Für den Betrieb des Stufenlifters **StepUp** ist ein Stromanschluß von 220 V erforderlich.

Auf Wunsch kann das System auch mit Akkubetrieb ausgestattet werden.



Technische
Änderungen
vorbehalten




Heymer
Made in
Germany

DGM erteilt

Technische Daten

Ein optionaler Handlauf aus Edelstahl sorgt für die Sicherheit beim Begehen der Stufen.

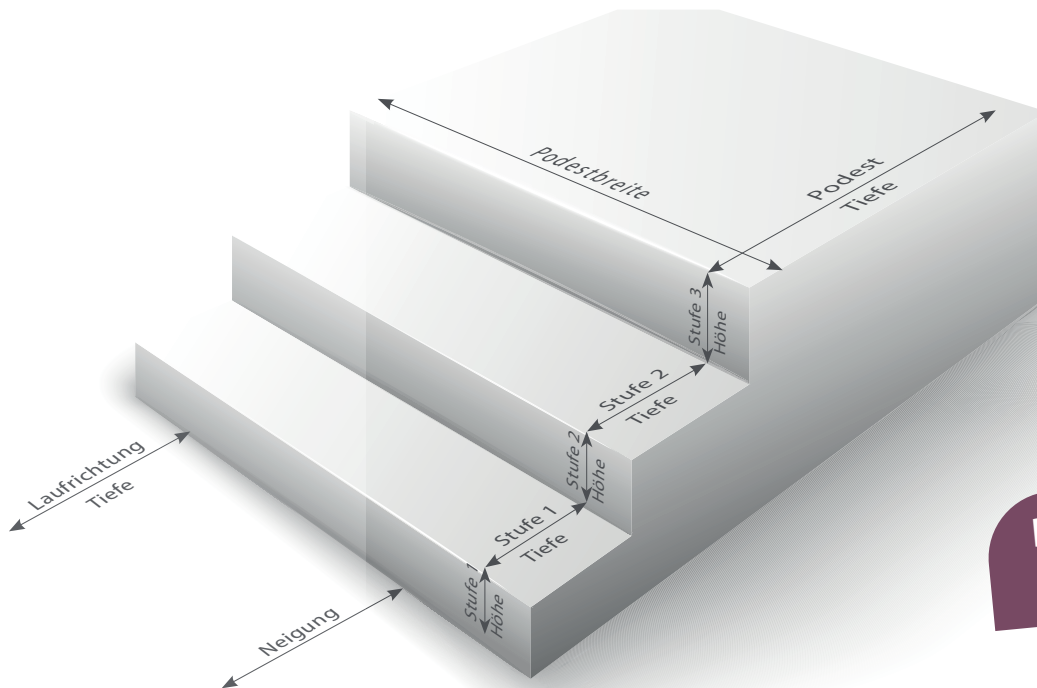

**Bis maximal
6 Stufen!**

Außerdem benötigen wir:

- Anzahl der weiteren Stufen mit den Werten der Höhe und der Tiefe
- den Winkel über alle Stufen
- die absolute Breite des Rollstuhles
- die absolute Länge des Rollstuhles
- das ungefähre Gewicht von Rollstuhl & Insasse



Technische Daten:

Führungsschiene	gepulvertes Aluminium
Plattformbreite	800 x 1000 mm
Plattformbreite	900 x 1200 mm
Stromanschluß	220 V

Gesamtbreite ab	ab 100 cm
Ladegerät bei Akkubetrieb	24 V; 2 A
Max. Belastung	250 kg
Eigengewicht	ab 50 kg



BARRIEREFREIES BAUEN



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de



Ihr Sanitätsfachhandel

