



Rehatechnik **HEYMER**

LIFTERSYSTEME

Heymer **StehFix**

AUFRICHTLIFTER



Hilfsmittel-
nummer
vorhanden

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.rehatechnik-heymer.de



Heymer **StehFix**

AUFRICHTLIFTER

Der Heymer **StehFix** wurde für MS- und ALS-Patienten sowie Muskeldystrophiker entwickelt, die mit keinem Gurt und keiner Schale aufgerichtet werden können.

Mit dem Heymer **StehFix** werden Patienten aus der sitzenden Position in eine selbstständige Stehposition gebracht.

Er kann zum Transfer z. B. von Rollstuhl auf Toilette genutzt werden, aber auch für das tägliche Stehtraining.



Leicht erklärt
auf YouTube

Gerne kommen
wir auch persönlich
bei Ihnen vorbei.



02932 90220-0 oder
info@rehatechnik-heymer.de

mit elektronischer
Aufrichtfunktion



Der Patient steht frei und
eigenständig um z. B.

- Hosen an- und auszuziehen
- Windeln zu wechseln
- Intimpflege durchzuführen
- Dekubitusprophylaxe zu betreiben
- Sehnen und Bänder zu dehnen
- Stoffwechsel anzuregen


Technische Daten:

Motor	24 V
Wartungsfreier Akku	2 x 12 V/2,6 Ah
zulässige Belastung	bis 130 kg
Breite	63 cm

Zubehör:

- verstellbarer Wadengurt mit Schnellverschluss
- höhenverstellbare Schienenbeinpolster
- verstellbarer Fersenhalter

Aufricht-
lifter und
Stehtrainer

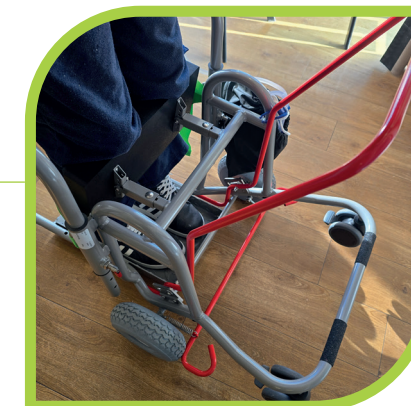

Wadengurt



Hüftgurt



Kippvorgang



Fersenstange

Die Oberkörperlänge kann in der
Höhe verstellt werden. Als Zube-
hör lässt sich ein Therapietisch als
Ablagemöglichkeit montieren.

Durch den anschließenden Kipp-
vorgang wird der Beckengurt voll-
ständig entlastet.

Durch die Fixierung in der geneig-
ten Stellung kann sich die Pflege-
kraft mit beiden Händen um den
Patienten kümmern.

Durch eine optimale Gewichts-
verteilung lässt sich der Heymer
StehFix auch in kleinen
Räumen sehr leicht rangieren.
Das schmale und niedrige Fußteil
begünstigt das Unterfahren von
Rollstühlen, Toiletten und Betten.

Technische Daten:

Länge	100 cm
Höhe	110 bis 140 cm
Gewicht	25 kg



Technische
Änderungen
vorbehalten



Heymer
Made in
Germany



LIFTERSYSTEME



Gerne erstellen wir, zusammen mit Ihnen, den Antrag auf wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



Liftersysteme



LiftAccessoires



Barrierefreies Bauen



Zusatzantriebe für Rollstühle



Rehatechnik
HEYMER

Von-Siemens-Str. 15a
59757 Arnsberg

Tel. 02932 90220-0

Fax 02932 90220-69

info@rehatechnik-heymer.de

www.rehatechnik-heymer.de



Ihr Sanitätsfachhandel

